

JumboMix[®] 3500

大容量实验室均质器



大容量样品的高精准重载均质

interscience

均质体积高达3750毫升！

JumboMix®实验室均质器通过其2个叶片的拍打确保最佳的细菌提取。适用于200-3750毫升的样品制备，所有样品在30-60秒内就能完成均质（样品重量最多可达400克）。

应用范围：大肠埃希菌O157:H7，沙门氏菌，婴儿奶粉，巧克力，无菌控制测试，隐孢子虫以及贾第虫属寄生虫，样品池（比如：15份25克的样品混合至375克）...

强力、重载

- 容量高达3750毫升
- 适用于375克样品10倍稀释
- 非常安静

符合人体工学

- 叶片并排停靠：方便放置均质袋
- 304L全不锈钢支架推车，最佳人体工学高度（可选配件）
- 数码显示屏

专利

方便清洁

- 全不锈钢
- 270°全开门
- **Click & Clean®**
可拆卸叶片

安全可靠

- 手柄关闭，启动均质
- **Q-Tight®**密封：
顶部无漏液
- 安全滴水盘



质量保障

- 终身保修：
减震器和可视窗
- 3年质保
(保修卡生效后)
- 法国制造

专利


可调节均质力度

- 依样品调节均质力度
- 高达22.6公斤推力：可均质坚硬的样品




应用范围

- 含沙门氏菌的375克样品
- 含大大肠埃希氏菌O157:H7的75克、325克或者375克样品
- 125克含李斯特菌和单核细胞增生李斯特菌的样品
- 样品池

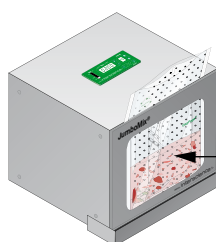

样品池

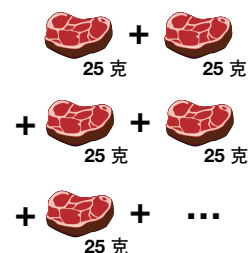

JumboMix® 3500

2种型号:



JumboMix® 3500 P CC

> 基础应用

货号 031 110



JumboMix® 3500 W CC

> 带可视窗

货号 032 110



技术参数详见手册背面 →

JumboLine®


制备375克样品10倍稀释的最佳选择！



DiluFlow® + 大容量适配器

重量稀释器

DiluFlow® Elite - 货号 503 205 • DiluFlow® Pro - 货号 502 205 • 大容量适配器 - 货号 505 006

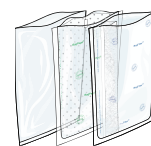

BagFilter®

侧边滤膜均质袋

2000 毫升 - 货号 111 200

3500 毫升 - 货号 113 510

BagPage®

全滤膜均质袋

2000 毫升 - 货号 122 200

3500 毫升 - 货号 123 010

BagLight®

无滤膜均质袋

2000 毫升 - 货号 132 200

3500 毫升 - 货号 133 025



JumboStand
人体工学手推车

货号 037 000



BagOpen® 3500
开袋器

货号 211 350



BagRack® 3500
均质袋存储支架

2 隔间 - 货号 221 352

4 隔间 - 货号 221 350



BagClip® 3500
密封夹

货号 231 350



BagPipet® & BagTips®

移液器 - 货号 251 091

吸管 - 货号 252 024

技术参数

	JumboMix® 3500 P CC	JumboMix® 3500 W CC
货号	031 110	032 110
概述		
全不锈钢 304L外壳	✓	✓
可调节均质力度 (专利)	✓	✓
多功能数字显示屏	✓	✓
可调节叶片	✓	✓
叶片并排停靠	✓	✓
Click & Clean 可拆卸&清洁叶片 (专利)	✓	✓
可视窗门	-	✓
技术规格		
最佳均质体积	200 - 3750 毫升	
滴水盘	选配	标配
Q-tight 密封条	特殊密封可防止液体从袋子顶部泄露	
无刷电机	✓	✓
速度	可调节均质速度: 1.5, 3, 4.5, 6 次/秒	
可调节均质时间	1 秒 - 1 小时或无穷大 /倒计时	
门类型	普通门	可视窗门
开门	270度可打开的门	
电压和频率	100-240 V- 50-60 Hz / 8A	
质保	3年 (保修卡注册后)	
终身保修	减震器	可视窗门, 减震器
备件供应期限	10年	
符合	ISO 7218, ISO 6887, FDA BAM (细菌学分析手册)	
重量和尺寸		
产品尺寸 (宽 x 深 x 高)	51.2 x 52.3 x 46.8 厘米	51.2 x 52.3 x 46.8 厘米
净重	52.2 千克	49.2 千克
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高)	61 x 57 x 57 厘米	61 x 57 x 57 厘米
毛重	56.9 千克	53.9 千克

JumboMix® 3500 P CC: 1根电源线, 1份用户手册, 1包免费均质袋样品, 1份合格证/质保卡。
JumboMix® 3500 W CC: 1个安全滴水盘, 1根电源线, 1份用户手册, 1包免费均质袋样品, 1份合格证/质保卡。



INTERSCIENCE产品由interlab公司制造, 并通过 ISO9001 认证。

微生物解决方案全系列



instaBAG®
含脱水培养基的均质袋



DiluFlow®
重量稀释器



FlexiPump®
液体分装泵



easySpiral Dilute®
自动稀释接种仪



ScanStation®
菌落实时培养与计数工作站

本地经销商

interscience 全球分布

巴黎
电话: +33 (0)1 34 62 62 61 - 邮址: info@interscience.com
法兰克福
电话: +49 611 7238 7770 - 邮址: info@interscience.com
波士顿
电话: +1 781 937 0007 - 邮址: sales.usa@intersciencelab.com
上海
电话: +86 (0)21-64739390 - 邮址: sales.china@interscience.cn
新加坡
电话: +65 6977 7232 - 邮址: sales.asia@interscience.com
东京
电话: +81 3 6712 9715 - 邮址: sales.japan@interscience.com